


# オーキシス<sup>®</sup> 9 $\mu$ gタービュハイラー<sup>®</sup>

正しく吸入するために



まずはキャップを回して外し、  
吸入器をまっすぐ立ててもちましょう。

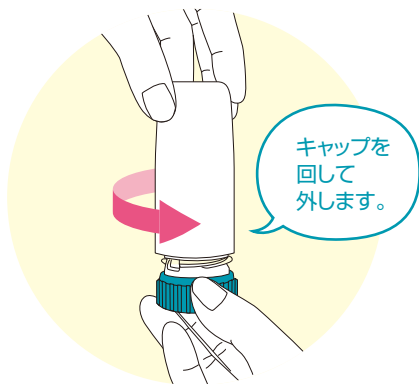

## オーキシスタービューヘイラーは

1吸入分の薬の量がごくわずかなので、  
刺激が少なく吸った感じがしないかも  
しれませんが、正しい吸入操作ができていれば、  
薬は吸入できています。

## 確認方法

正しい吸入操作ができているか不安な時は  
マウスピースにお手持ちの色の濃いハンカチ  
をかぶせて吸入してください。

正しい吸入操作ができていればハンカチに  
1吸入分の薬剤が残ります。



マウスピースに  
ハンカチをかぶせて  
吸入してください。



きちんと  
吸入できていれば  
ハンカチに薬剤が  
残ります。

※ハンカチをかぶせて吸入した場合、  
体内に薬は入りません。

## 小窓の表示の進み方と交換時期

28  
吸入製剤



使用開始

小窓には**最初に28**が表示されています。


小窓には**最初に60**が表示されています。

※28吸入製剤では、小窓上部に赤い印が少し見えるものもありますが、28吸入分使用いただけます。



「クルッ」「カチッ」の操作に連動して、小窓の表示が少し進みます。

使用を続けると、赤い印が徐々に見えてきます。

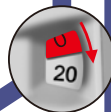

終了

「0」が小窓の中央に表示され、それ以上、下に進まなくなったら、使用を中止して新しい吸入器に交換してください。

※小窓が完全に赤色にならないことがあります。

60  
吸入製剤

### 注意事項

- 28吸入製剤の小窓に表示される数字は「28」「14」「0」です。  
60吸入製剤の小窓に表示される数字は「60」「40」「20」「0」です。
- 小窓に表示される数字は、1つきざみではありません。
- 青緑色の回転グリップは必要以上に回さないでください。  
必要以上に青緑色の回転グリップを回すと、吸入しなくても終了を示す「0」の表示が早く出てきます。
- 吸入器を振ると「カサカサ」と音が聞こえますが、これは乾燥剤の音です。薬の残量ではありません。

### 保管・手入れ・廃棄

- 使用後は必ずキャップを閉めて室温で保管してください。
- マウスピースが汚れた場合は乾燥した布などで拭き、水洗いはしないでください。
- 吸入器を分解しないでください。  
(マウスピースは、カチカチと音がして回りますが外れません)
- 各自治体の廃棄方法にしたがって廃棄してください。

 :キャップ  
:本体  
金属:スプリング

製造販売元

アストラゼネカ株式会社

販売元

Meiji Seika ファルマ株式会社

受付時間/月～金 9:00～17:00 (土・日・祝日および当社休業日を除く)

くすり相談室

電話 (0120)093-396 (03)3273-3539

OX001702

(MCP)

11M-14Y

2013年11月改訂

# オーキシス® 9μgター

## 1 右へ「クルッ」と回す



青緑色の回転グリップを右へとまるまで回します。

▲片手で吸入器本体を固定し、もう一方の手で青緑色の回転グリップを動かしてください。

新しい吸入器を使用するときに限り次の準備操作を一度だけ行ってください。



# ビューハイラー®の吸入方法

## 2 左へ「カチッ」と戻す



青緑色の回転グリップを左へ「カチッ」と音がするまで回します。  
1吸入分の薬がセットされます。

まっすぐに立てます。

クルッ

青緑色の回転グリップを左右に回して「カチッ」と3回鳴らします。  
その後 1 に進んでください

## 3

息を吐き、  
「スーッ」と深く吸い込む

青緑色の  
回転グリップを  
片手で持ちます。

大きく息を吐いた後に、マウスピースを  
くわえ、深く吸い込みます。  
その後、マウスピースから口を離します。

⚠ マウスピースに息を吹きかけないでください。  
吸入のときに、吸入器本体を握らないでください。

吸入器の  
各部名称